



XPCR103-AG SARS-CoV-2 AG Test


Klargjøre instrumentet for å utføre en test:

Slå på instrumentet ved å sette inn ID-kortet på siden av instrumentet.

Du vil høre at instrumentet slås på, og skjermen starter.

Hvis skjermen bare er nedtonet, trykk på berøringsskjermen for å vekke instrumentet.

XPCR Quick Reference Instructions (QRI) gir en illustrert trinnvis fremgangsmåte for hvordan du kjører en test.

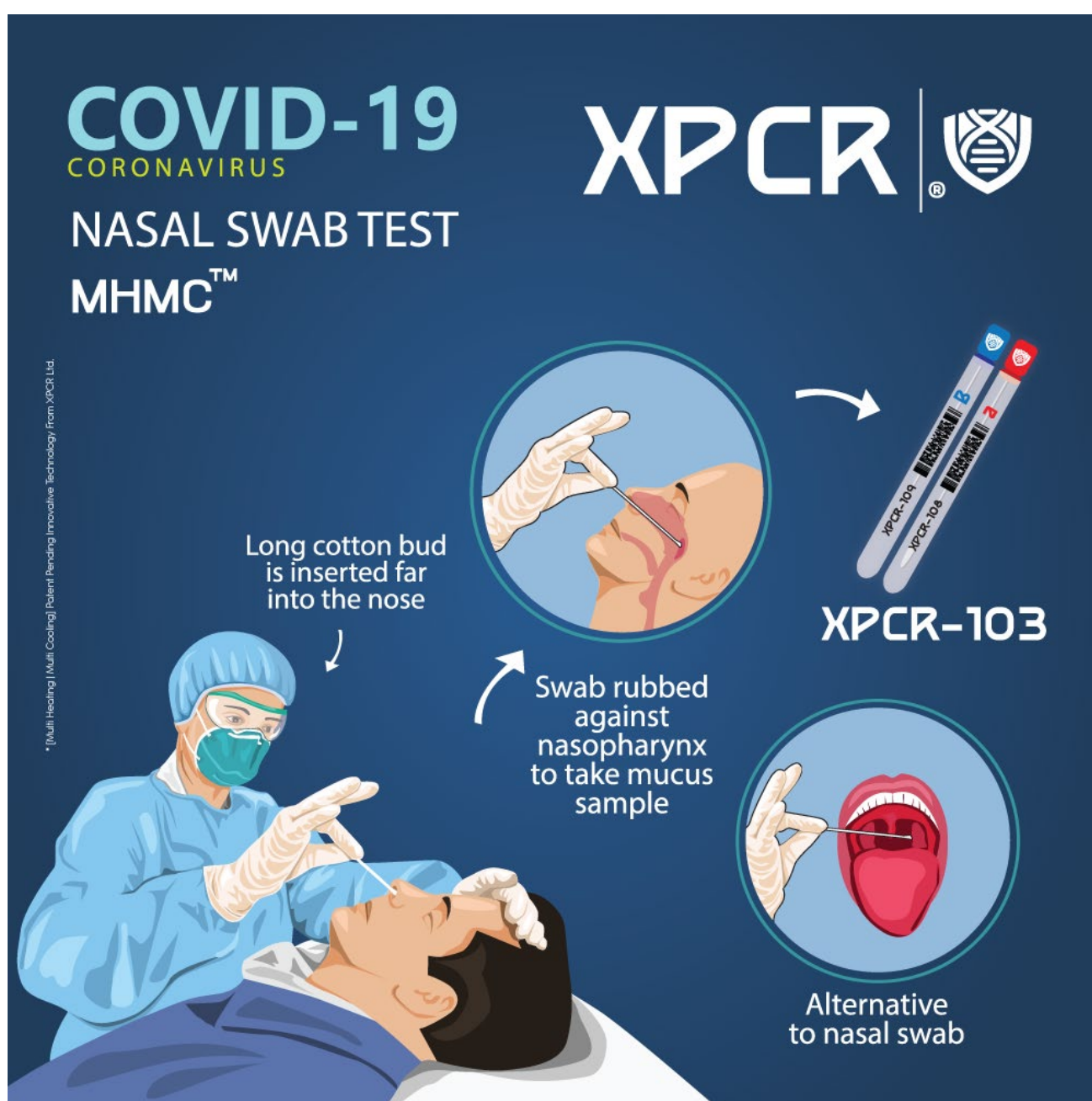


Instruksjoner for prøvetaking:

Når du samler alle typer prøver, følg forsiktighetsregler og retningslinjer for samlingen i henhold til organisasjonen din.


For prøveinnsamling av nesepinner, følg retningslinjene for innsamling av vattpinner.

Trinnene som følger gjelder en nesepinne.


Prøvetaking fra en nesepinne:

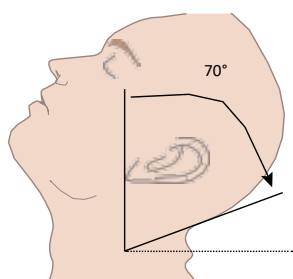

- Vipp pasientens hode bakover 70°

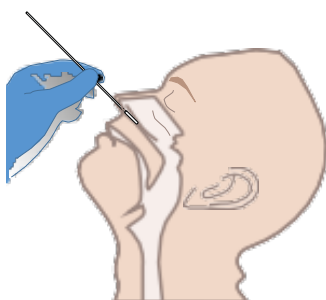

- Det er behov for en vattpinneprøve fra begge neseborene, og denne tas med samme vattpinne. Mens du roterer vattpinnen forsiktig, setter du inn vattpinnen mindre enn en tomme inn i det første neseboret til motstanden oppfylles ved Turbinatet. (Turbinat er de små strukturene inne i nesen).

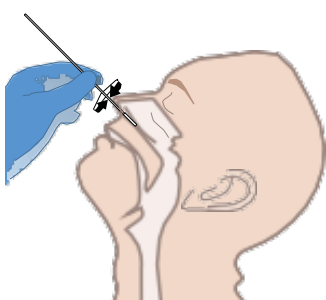


- Roter vattpinnen flere ganger mot neseveggen. Fjern og gjenta denne prosessen ved å bruke den samme vattpinnen i det andre neseboret. Sett deretter vattpinnen inn i røret (A).

Etter at pasienten har svabbet, sett inn vattpinnen i røret (A) så snart som mulig.

Utfører en prøve:

Hurtig Referanse Instruksjoner (QRI)




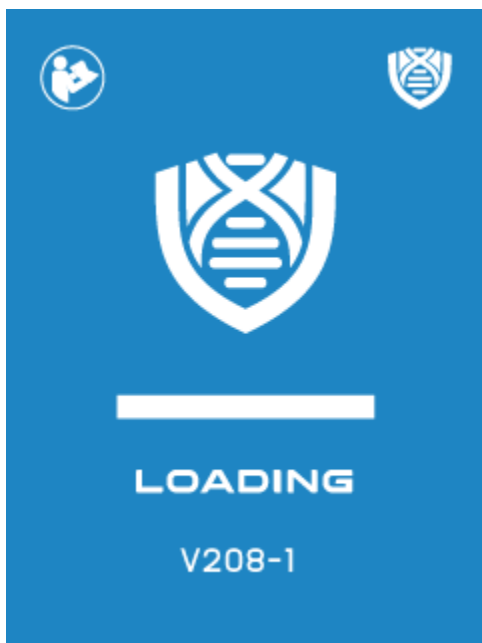

START INSTRUMENTET SOM
FORETAR SELVKONTROLLSJEKK




LES BRUKSANVISNINGEN FØR
DU BRUKER ENHETEN

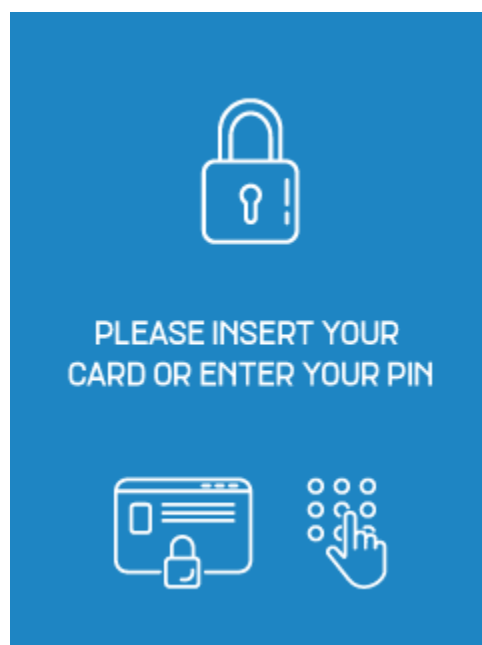


VELG PIN ELLER SMARTKORT
SOM PÅLOGGINGSMETODE




TRYKK (START) FOR Å STARTE
TESTINGEN

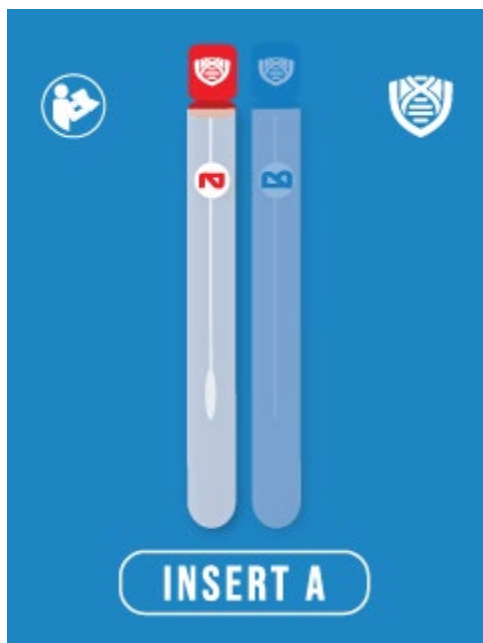


SETT RØRET (A) INN I
INSTRUMENTET (ETTER AT DU
HAR TATT VATTINNEN)

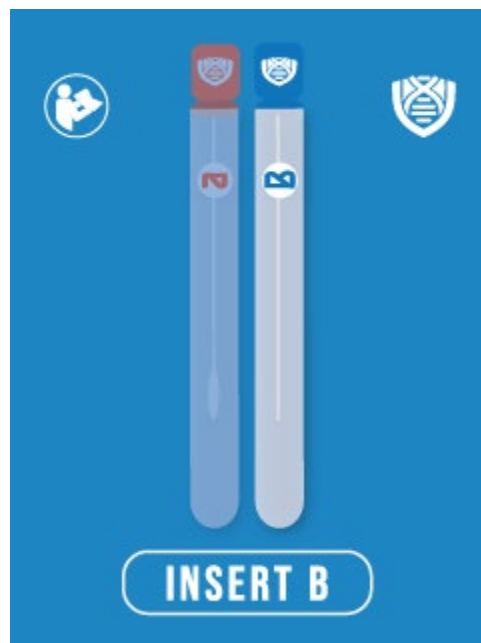


SETT RØRET (B) INN I
INSTRUMENTET

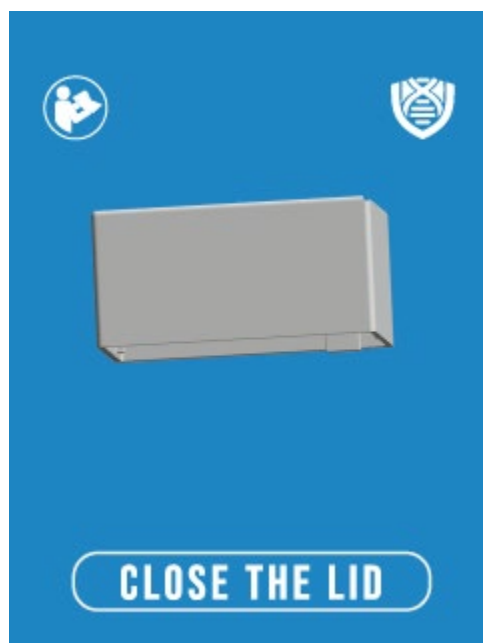


VÆR SIKKER PÅ AT LOKKET ER
LUKKET FOR Å FORTSETTE
TESTINGEN

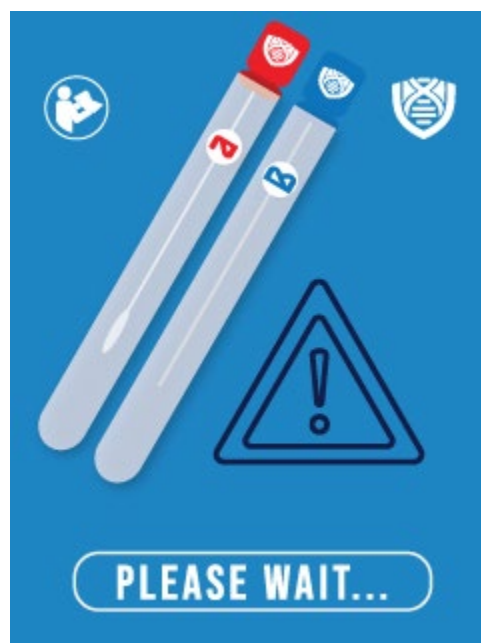


VENT TIL TRINN (1) AV
TESTINGEN ER FULLFØRT

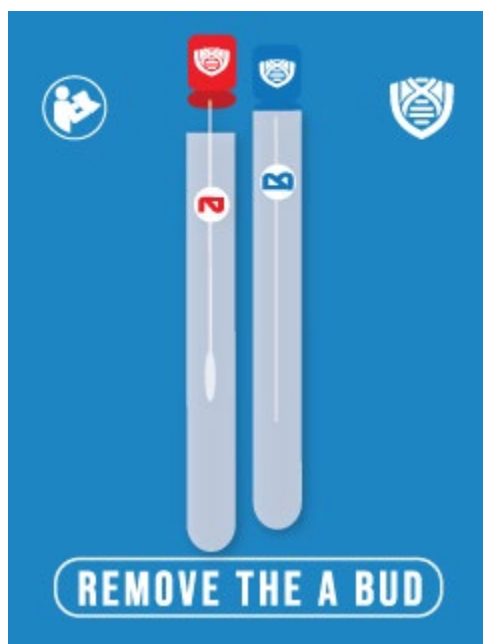


START FASE 2
FJERN KNOPPEN FRA RØRET
(A)

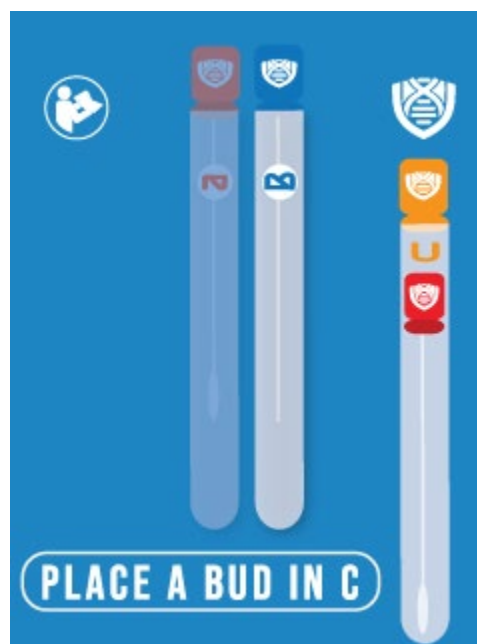

STIKK NÅ (A) KNOPPEN INN I
RØRET (C)

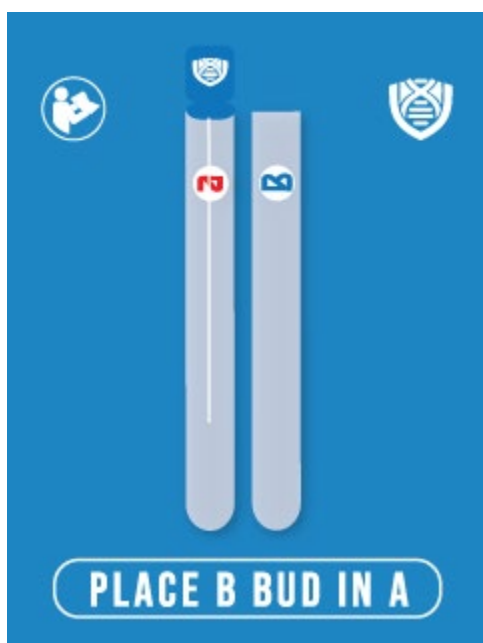

SETT INN (B) KNOPPEN I RØR
(A) FOR Å SAMLE PRØVEN

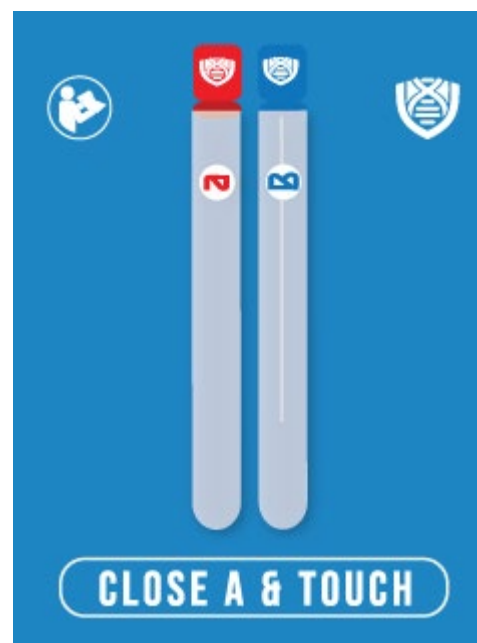


SETT INN KNOPPEN (B)
TILBAKE I RØR (B) OG SETT (A)
LOKKET OG KLIKK FORTSETT PÅ
SKJERMEN



CLOSE THE LID

VÆR SIKKER PÅ AT LOKKET ER
LUKKET FOR Å FORTSETTE
TESTEN

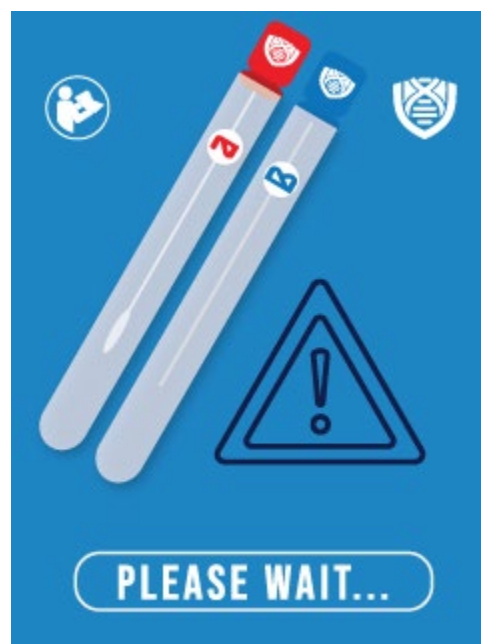

PLEASE WAIT...

VENT TIL TRINN (2) AV TESTEN
ER FULLFØRT



**CONNECTING TO XPCR
CLOUD PLATFORM
PLEASE WAIT..**

INSTRUMENTET KOBLES TIL
XPCR SKYPLATTFORM VIA
TILKOBLINGSMODULEN
(MOBIL ELLER WIFI)



**SENDING DATA TO XPCR
CLOUD PLATFORM
PLEASE WAIT..**


INSTRUMENTET SENDER DE
INNSAMLEDE TESTDATAENE
TIL XPCR SKYPLATTFORM




DATA FRA INSTRUMENTET
BEHANDLES PÅ XPCR
SKYPLATTFORM



SKJERMEN INDIKERER
VENTETID FOR RESULTATET
FRA XPCR SKYPLATTFORM

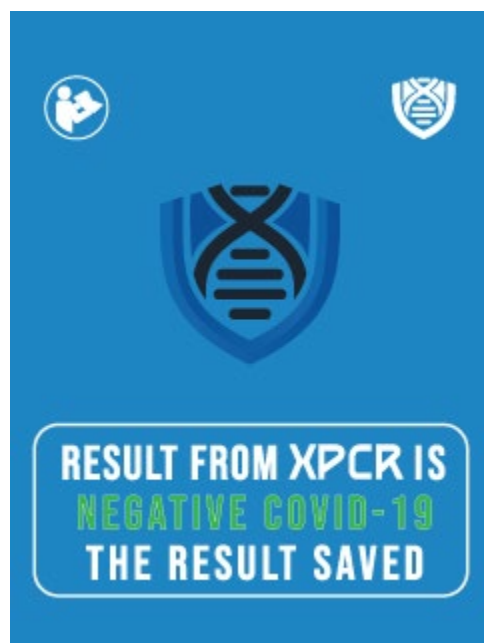

SKJERMEN VISER RESULTATET
(POSITIVT / NEGATIVT) FRA
XPCR SKYPLATTFORM

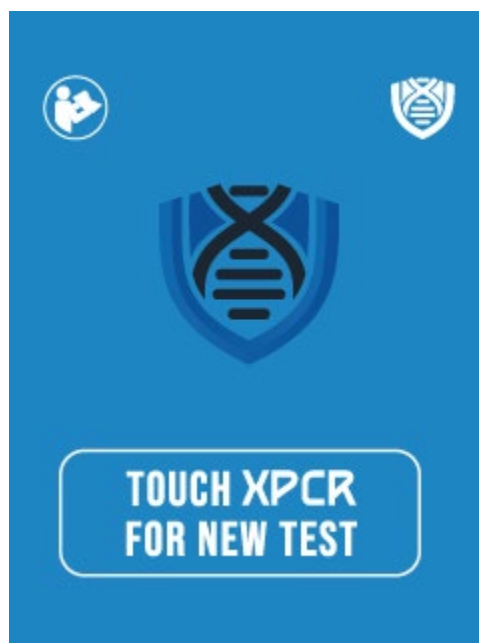

DU KAN BERØRE SKJERMEN
FOR Å STARTE EN NY TEST
ELLER FJERNE ID-KORTET FOR
Å SLÅ AV INSTRUMENTET

MERK: Et negativt resultat fra pasienter med symptomer som begynner utover tolv dager, bør behandles som formodende, og bekreftelse med en molekylær analyse, om nødvendig, før pasientbehandling kan utføres.

Ugyldige testresultater

Hvis det oppstår et problem, vises en melding på instrumentets berøringsskjerm. Varslingsmeldinger inkluderer nyttig informasjon og er uthevet med et oransje banner.

Feilmeldinger inkluderer også  symbol. Alle meldinger vil inneholde en beskrivelse av instrumentets status eller feil og en instruksjon. Feilmeldinger inneholder en identifikasjonskode som kan brukes til videre feilsøkingsformål. Se brukerhåndboken for XPCR-plattformen hvis en feilmelding vises på berøringsskjermen til XPCR-instrumentet og kontakt XPCR-kundeservice på telefonnummer +47 401 46 314.

Eksempel på feilskjerm: Hvis On-Board Control (OBC) mislykkes, vises en feilmelding, og ingen testresultater blir returnert.

Følg instruksjonene på skjermen for å avhende testrørene og starte en ny test. Kontakt kundeservice hvis problemet vedvarer.

Innebygde kontroller:

Instrumentet leser strekkoden på hvert testrør og kan identifisere om røret har overskredet utløpsdatoen for bruk.

XPCR Instrument og XPCR SARS-CoV-2 Ag testrør har flere kvalitetskontrollfunksjoner innlemmet for å sikre gyldigheten av hver testkjøring.

Disse kontrollene sikrer at testrørene ikke har blitt skadet

eller brukt tidligere.

Hvis kontrollen ikke bekreftes, vil testkjøringen bli avvist, og en feilmelding vises på instrumentets berøringsskjerm.

XPCR-instrumentet sikrer kvaliteten på oppnådde testresultater gjennom følgende funksjoner:

- Automatiske kontroller av at instrumentet fungerer som det skal når det slås på og under drift.
- Dette inkluderer drift av elektriske komponenter, varmeapparatdrift, batteriladetilstand, mekaniske aktuatorer og sensorer og optisk systemytelse.
- Overvåking av testrørens ytelse og kontroller under testkjøring.
- Evne til å utføre kvalitetskontrolltester ved hjelp av XPCR-kvalitetskontroll for å oppfylle forskriftens samsvarskrav.

Kvalitetskontroller:

Flytende kontroller for SARS-CoV-2 Ag er tilgjengelig fra XPCR. Detaljer finner du via nettstedet <https://xpcr.no> eller på telefonnummeret til kundeservice +47 401 46 314.

Retningslinjene for kvalitetskontroll er etter eget skjønn.

God laboratoriepraksis anbefaler bruk av kontrollmateriale

Til fullstendig kvalitetskontrollvurdering av XPCR Instrument og XPCR SARS-CoV-2 Ag testrør, må du bruke XPCR SARS-CoV-2 Ag kvalitetskontrollpakke.

Kvalitetskontroller kommer som positive og negative kontroller.

XPCR anbefaler at kontroller kjøres en gang for:

- hver nye operatør
- som kreves av interne kvalitetskontrollprosedyrer og i samsvar med lokale forskrifter eller akkrediteringskrav.

Hvis XPCR Antigen Quality Controls ikke utfører som forventet, gjenta QC-testen, og hvis problemene vedvarer, ikke rapporter pasientresultater og kontakt XPCR Kundeservice på telefonnummer +47 401 46 314.

Rengjøring og desinfisering:

Rengjør alltid instrumentet etter hver pasientbruk.

Tørk av de ytre overflatene på XPCR-instrumentet med en myk, lett fuktig klut når den ser synlig skitten ut.

Desinfiser instrumentet mellom hver pasienttest ved hjelp av XPCR-godkjente kluter som Clorox Wipes.

Bruk servietten til overflaten på instrumentet er synlig vått.

La overflaten forbli våt i 5 minutter og la luften tørke. Unngå porter og strøminntak.

Ikke spray eller hell løsningen direkte på instrumentet.

- Ikke legg rengjøringsmidler i testrørsporet.

Juridiske merknader:

XPCR-instrumentet, testrørene og all gitt XPCR-dokumentasjon ('Produkter') er beskyttet av loven.

Den intellektuelle eiendommen til XPCR-produktene forblir hos XPCR.

Detaljer om relevant åndsverk angående våre produkter finner du på <https://xpcr.no>.